

## At-Home Test for the Detection of Pregnancy

Simple & Discreet Testing. An accurate result is obtained in 5 minutes.

### INSTRUCTIONS AND USE

#### PLEASE READ ALL THE INFORMATION IN THIS INSERT BEFORE PERFORMING THE TEST.

Do not open protective pouch until just before performing the test. Do not use after the expiration date stamped on the side of the carton. Store in a dry place between 38° F - 86° F (4° C - 30° C). Do not freeze. Keep out of reach of children.

For in-vitro diagnostic use. Not to be taken internally.

Do not re-use test strip. If you have any questions, call us toll-free at 1-800-367-6022 Mon - Friday 7am to 5pm ET or chat with us at firstresponse.com.

#### When to use FIRST RESPONSE™ Pregnancy Test Strips

When a woman becomes pregnant, her body produces a hormone called hCG (human Chorionic Gonadotropin). The secretion of this hormone by the developing placenta begins soon after conception and increases throughout the first trimester. The presence of hCG in the urine is an excellent indication in the detection of pregnancy. FIRST RESPONSE™ Pregnancy Test Strips is a qualitative test for the detection of hCG in urine. With the FIRST RESPONSE™ Pregnancy Test Strips, you can test on the first day of your missed period.

#### EACH POUCH CONTAINS:

- ➔ 1 FIRST RESPONSE™ Test Strip
- ➔ 1 moisture absorbent pack. The absorbent pack helps to preserve the test strip while enclosed inside the pouch. This pack is not to be used in connection with the test and should be discarded once the pouch is opened.

#### Before you begin the test:

Please read all the information in this leaflet before performing the test. You need a disposable cup and 1 test strip. The directions should be followed precisely to get accurate results.


- With FIRST RESPONSE™ Pregnancy Test Strips you can perform your test anytime of the day. You do not have to use the first morning urine. Generally, however, your first morning urine contains the highest level of the pregnancy hormone hCG (human Chorionic Gonadotropin).
- Do not open protective pouch until you are ready to perform the test.
- Have a watch, clock or timer available.

#### How to perform the test:

- Urinate in a disposable cup. You will need 5 minutes to perform the test. If you do not have time to perform the test immediately after collecting the urine, cover and store the urine in the refrigerator. It should not be stored for longer than 12 hours. Never freeze the sample. If the urine is refrigerated and you are ready to perform the test please remove the urine sample from the refrigerator and allow to reach room temperature. This should take approximately 30 minutes. Do not heat or shake.
- Remove one FIRST RESPONSE™ Pregnancy Test Strip from its pouch by tearing along the "splice".
- With the arrows pointing towards the urine, dip the test strip into the urine sample for 10 seconds or until you see the urine move along the test strip. The surface of the sample must be below the black boundary line on the strip. See illustration.

Note: Hold the strip as straight as possible.

- Remove the test strip from the urine sample. Place it on a non-absorbent flat surface and begin timing. DO NOT move the test strip while results are developing.
- Read the results after 5 minutes. Use the examples in the "How to read the test results" section to help you interpret your result. Do not interpret after 15 minutes.
- Discard the test strip in the trash after you have read your result.

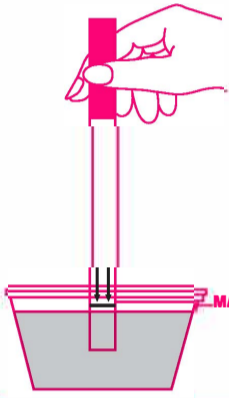

#### HOW TO READ THE TEST RESULTS

##### • Read results at 5 minutes

➔ **Pregnant:** Two pink color bands within the test area means that you are likely to be pregnant. One line may be lighter than the other. Appearance of the results may vary.



➔ **Not Pregnant:** One color band within the test area means that you are not pregnant.



### QUESTIONS AND ANSWERS

#### Q: When can I perform the test?

A: If performing the test on the first day of your missed period, it is important to use first morning urine. The first morning urine contains the highest concentration of hCG. If your period is more than one week overdue, use of morning urine is not as critical, since your hCG level should be significantly higher.

#### Q: How accurate is the test?

A: In studies of the FIRST RESPONSE™ Pregnancy Test Strips with urine samples representative of both pregnant and non-pregnant subjects, both laboratory technicians and consumers obtained the correct expected result in more than 99%\* of the samples. \*>99% accurate at detecting the pregnancy hormone. However, some pregnant women may not have detectable amounts of the pregnancy hormone hCG in their urine on the first day of the missed period or may have miscalculated the first day of their period.

#### Q: Can the result change from standing for a certain length of time?

A: It is important that the result be interpreted between 5 to 15 minutes. In order to have a correct result, you should only read the result after 5 minutes from adding the urine sample. However, in order to prevent any incorrect results, the test result should not be interpreted after 15 minutes.

#### Q: Can any medicines affect the result?

A: Test results should not be affected by oral contraceptives, painkillers, antibiotics, other common drugs or caffeine. However, fertility drugs may cause an inaccurate result. Medicines that contain hCG (hCG drugs which are given by injections) can give false results.

#### Q: If the test result is positive, what do I do?

A: Remember, this is not intended to replace your healthcare professional's diagnosis. If the test result is positive, you should see your healthcare professional to confirm that you are pregnant and to discuss your pregnancy and advise on the steps you should take next. The earlier you see your healthcare professional, the better it is for your health and that of your baby.

#### Q: If the test result is negative, what do I do?

A: A negative test result means that no pregnancy hormone has been detected. You may not be pregnant, or it may be too early to tell. If your period does not start within a week, you may have miscalculated the day your period was due. Repeat the test using another pregnancy test strip after 7 days. If the second test still gives you a negative result and you still have not menstruated, you should see your healthcare professional.

#### Q: I have waited longer than 5 minutes and still there are no lines in the test area. Is there anything wrong?

A: If no pink color band is visible within the test area 5 minutes after performing the test, the result is considered invalid. You should repeat the test with a new FIRST RESPONSE™ Pregnancy Test Strip. The test strip is not reusable. Possible causes for an invalid result include not holding the test strip in the urine for the appropriate length of time, or not immersing the test strip far enough into the urine for adequate sample absorption. Immersing the test strip past the black boundary line can also cause an invalid result.

If you have any questions, call us toll-free at 1-800-367-6022 Mon - Friday 7am to 5pm ET or chat with us at firstresponse.com

Manufactured for Church & Dwight Co., Inc. Ewing, NJ 08628  
FIRST RESPONSE is a trademark of Church & Dwight Co., Inc.

72020451  
FRIN-97854-01A

## Prueba casera para detección de embarazo

Prueba simple y discreta. Se obtiene un resultado preciso en 5 minutos.

### INSTRUCCIONES Y USO

#### LEA TODA LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONA ESTE PROSPECTO ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.

No abrir la bolsa protectora hasta el momento de realizar la prueba.

No usar después de la fecha de caducidad estampada en la parte lateral de la caja.

Almacenar en un lugar seco a una temperatura de entre 38 °F y 86 °F (4 °C y 30 °C). No congelar. Mantener fuera del alcance de los niños.

Para uso diagnóstico in vitro. No debe tomarse internamente.

No volver a utilizar la tira reactiva. Si tiene alguna pregunta, llámenos sin cargo al 1-800-367-6022, de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del este, o chatee con nosotros en firstresponse.com.

#### Cuándo usar FIRST RESPONSE™ Pregnancy Test Strips

Cuando una mujer queda embarazada, su cuerpo produce una hormona llamada gonadotropina coriónica humana (human chorionic gonadotropin, hCG). La secreción de esta hormona por la placenta en desarrollo comienza poco después de la concepción y aumenta durante el primer trimestre. La presencia de hCG en la orina es un excelente indicador en la detección de embarazos. FIRST RESPONSE™ Pregnancy Test Strips es una prueba cualitativa para la detección de hCG en orina. Con FIRST RESPONSE™ Pregnancy Test Strips, puede realizarse la prueba el primer día de retraso del período.

#### CADA ENVASE CONTIENE:

- ➔ 1 tira reactiva FIRST RESPONSE™ Test Strips
- ➔ 1 paquete absorbente de humedad. El paquete absorbente ayuda a preservar la tira reactiva mientras se encuentre dentro del envase. Este paquete no debe usarse en relación con la prueba y debe desecharse una vez que se abra el envase.

#### Antes de comenzar la prueba:

Lea toda la información que proporciona este prospecto antes de realizar la prueba. Necesita un recipiente desechable y 1 tira reactiva. Las instrucciones deben seguirse cuidadosamente para obtener resultados precisos.


- Con FIRST RESPONSE™ Pregnancy Test Strips, puede realizarse la prueba en cualquier momento del día. No es necesario usar la primera orina de la mañana. Sin embargo, generalmente es la primera orina de la mañana la que contiene el nivel más alto de la hormona del embarazo hCG.
- No abra la bolsa protectora hasta que esté lista para realizarse la prueba.
- Tenga a mano un reloj o un temporizador.

#### Cómo realizar la prueba:

- Orine en un recipiente desechable. Necesitará 5 minutos para realizarse la prueba. Si no tiene tiempo para realizarse la prueba inmediatamente después de recolectar la orina, cúbrala y guárdela en el refrigerador. No debe almacenarse durante más de 12 horas. Nunca congele la muestra. Si la orina está refrigerada y usted está listo para realizarse la prueba, retire la muestra de orina del refrigerador y déjela reposar hasta que alcance temperatura ambiente. Esto debería llevar aproximadamente 30 minutos. No la caliente ni la agite.

- Desgarre la bolsa a lo largo de la "unión" y retire una tira reactiva FIRST RESPONSE™ Pregnancy Test Strips.
- Con las flechas apuntando hacia la orina, sumerja la tira reactiva en la muestra durante 10 segundos o hasta que vea que la orina se mueve por la tira reactiva. La superficie de la muestra debe estar por debajo de la línea negra que se encuentra en la tira. Consulte la ilustración.

- Nota: Sostenga la tira lo más recta posible.
- Retire la tira reactiva de la muestra de orina. Colóquela sobre una superficie plana no absorbente y comience a cronometrar. NO mueva la tira reactiva mientras espera los resultados.
- Lea los resultados después de 5 minutos. Utilice los ejemplos de la sección "Cómo leer los resultados de la prueba" para interpretar su resultado. No interprete el resultado después de 15 minutos.
- Deseche la tira reactiva en la basura después de haber leído el resultado.

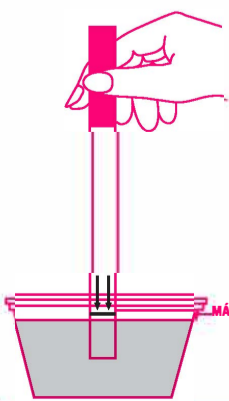

#### CÓMO LEER LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA

##### • Lea los resultados a los 5 minutos

➔ **Embarazada:** dos bandas de color rosado dentro del área de prueba indican que es probable que esté embarazada. Una línea puede ser más clara que la otra. El aspecto de los resultados puede variar.



➔ **No embarazada:** una banda de color rosado dentro del área de prueba indica que no está embarazada.



### PREGUNTAS Y RESPUESTAS

#### P: ¿Cuándo puedo realizarme la prueba?

R: Si se realiza la prueba el primer día de retraso del período, es importante que use la primera orina de la mañana. La primera orina de la mañana contiene la concentración más alta de hCG. Si su período tiene más de una semana de retraso, el uso de la orina de la mañana no es tan crítico, ya que su nivel de hCG debería ser significativamente más alto.

#### P: ¿Qué tan precisa es la prueba?

R: En estudios de FIRST RESPONSE™ Pregnancy Test Strips con muestras de orina representativas de mujeres embarazadas y no embarazadas, tanto los técnicos de laboratorio como las consumidoras obtuvieron el resultado esperado correcto en más del 99 %\* de las muestras.

\*>99% de precisión en la detección de la hormona del embarazo. No obstante, es posible que algunas mujeres embarazadas no tengan cantidades detectables de hormona del embarazo hCG en su orina el primer día de retraso del período, o que hayan calculado erróneamente el primer día de su período.

#### P: ¿Puede el resultado cambiar si se espera un cierto período de tiempo?

R: Es importante que el resultado se interprete en un intervalo de entre 5 y 15 minutos. Para obtener un resultado correcto, solo debe leer el resultado después de 5 minutos de haber agregado la muestra de orina. Sin embargo, para evitar cualquier error, el resultado de la prueba no debería interpretarse después de los 15 minutos.

#### P: ¿Pueden los medicamentos afectar el resultado?

R: Los resultados de las pruebas no deberían verse afectados por anticonceptivos orales, analgésicos, antibióticos, otros medicamentos comunes o cafeína. Sin embargo, los medicamentos para la fertilidad pueden causar un resultado inexacto. Los medicamentos que contienen hCG (medicamentos de hCG que se administran mediante inyecciones) pueden dar resultados falsos.

#### P: ¿Qué hago si el resultado es positivo?

R: Tenga en cuenta que esta prueba no está diseñada para reemplazar el diagnóstico de su profesional de la atención médica. Si el resultado de la prueba es positivo, debe consultar a su profesional de atención médica para confirmar el embarazo, para poder hablar al respecto y para que este le aconseje sobre los pasos que debe seguir a continuación. Cuanto antes vea a su profesional de atención médica, mejor será para su salud y la de su bebé.

#### P: ¿Qué hago si el resultado es negativo?

R: Un resultado negativo en la prueba significa que no se ha detectado ninguna hormona del embarazo. Es posible que no esté embarazada o que sea demasiado pronto para saberlo. Si su período no comienza dentro de una semana, es posible que haya calculado mal el día en que este debía aparecer. Repita la prueba con otra tira reactiva para la detección del embarazo después de 7 días. Si la segunda prueba le vuelve a dar un resultado negativo y aún no ha menstrado, debe consultar con su profesional de atención médica.

#### P: He esperado más de 5 minutos, y todavía no hay líneas en el área de prueba. ¿Ocurre algo malo?

R: Si no se ve una banda de color rosa dentro del área de prueba 5 minutos después de realizarla, el resultado se considera inválido. Debe repetir la prueba con una nueva tira reactiva FIRST RESPONSE™ Pregnancy Test Strips. La tira de prueba no es reutilizable. Las posibles causas de un resultado inválido incluyen no mantener la tira de prueba en la orina durante el período de tiempo adecuado o no sumergir suficientemente la tira de prueba en la orina para asegurar una absorción adecuada de la muestra. Sumergir la tira de prueba más allá de la línea de negra también puede causar un resultado inválido.

Si tiene alguna pregunta, llámenos sin cargo al 1-800-367-6022, de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del este, o chatee con nosotros en firstresponse.com

Fabricado por Church & Dwight Co., Inc. Ewing, NJ 08628.  
FIRST RESPONSE es una marca comercial de Church & Dwight Co., Inc.

72020451  
FRIN-97854-01A